


Bezvadumutesskalotājs (zobuskalošanasrīks) Lietošanasinstrukcija

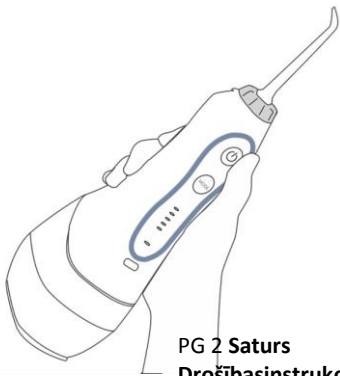

PG 2 Saturs

Drošībasinstrukcija

Izstrādājuma apraksts.....3

Lietošanas uzsākšana.....5

Aprūpeun garantija.....7

Tipiskāskļūdasunto profilakse.....11

PG 3

PAMATPRASĪBAS DROŠĪBAI

Lietojot elektropreces, īpaši bērnu tuvumā, vienmēr ievērojiet drošības norādījumus, tostarp šādus:

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS INSTRUKCIJAS:

BRIESMAS:

Elektriskās strāvas trieciena samazināšana:

- Elektriskās strāvas trieciena samazināšana:
- Nelietojiet lādētāju uz rokas.
- Negremdējiet lādētāju ūdenī vai šķidrumā.
- Pirms lādētāja pirmās lietošanas reizes pārlicinieties, vai lādētāja vads nav bojāts, un darbības laikā pārbaudiet kabeli.

BRĪDINĀJUMS:

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka, ugunsgrēka vai citu cilvēku bojājumu risku:


- Nepievienojiet šo ierīci elektrības kontaktligzdai, izņemot gadījumus, kas aprakstīti ierīces vai lādētāja instrukcijās.
- **Nepiemērotu lādētāju lietošana sabojā ierīci un anulē garantiju.**
- Ja izstrādājums tiek demontēts / demontēts JEBKĀDA iemesla dēļ, garantija nav spēkā.
- Nelietojiet šo produktu, ja vads vai vads ir bojāts, ja tas nedarbojas pareizi, ja tas ir nokritis vai ja tas ir nokritis ūdenī.
- Nenovietojiet ūdeni mēle, ausīs, degunā vai citās delikātās vietās. Šī produkta ūdens spiediens šajās vietās var radīt nopietnus bojājumus.
- Nepalaidiet ūdeni degunā vai ausī. Dažos gadījumos hlora krāna ūdens Naegeria Fowler var izraisīt sliktu dūšu, un tas var būt letāls, ja ūdeni novirza uz šīm vietām.

PG 4


- Izmantojiet šo produktu, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā vai kā norādīts.
- Izmantojiet tikai H2O floss ieteiktās sprauslas un piederumus.
- Nenometiet un neievietojiet svešķermeņus produkta atverēs.
- Turiet lādētāju prom no karstām virsmām.
- Nelietojiet šo produktu ārā vai vietās, kur ir uzklāti aerosoli vai aerosoli.
- Šajā ierīcē nelietojiet jodu, sāļjumu vai ūdenī šķīstošas koncentrētas ēteriskās eļļas. Turpinot lietošanu, var samazināties veiktspēja un saīsināt produkta kalpošanas laiku. Šī produkta izmantošana var anulēt garantiju.
- Piepildiet rezervuāru ar ūdeni vai citu ārsta ieteiktu šķidrumu.
- Pirms šī produkta lietošanas noņemiet visus iemutņus un rotaslietas.
- Nelietojiet ierīci, ja Jums ir iekaisis vai mutes čūla.

PG 5

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

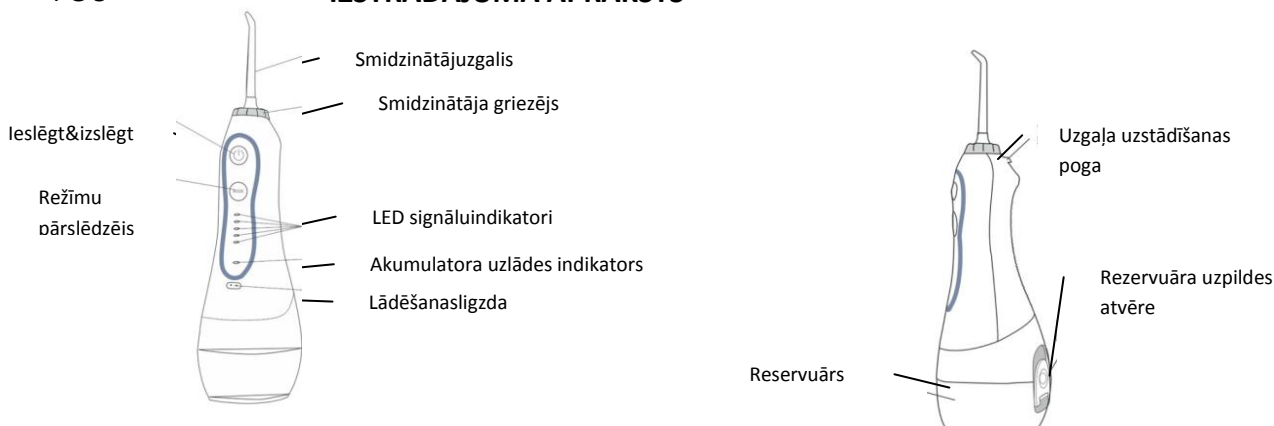

PG 6

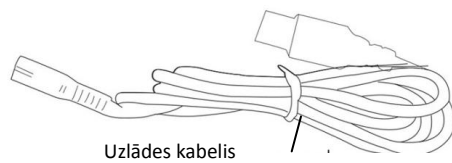

Uzlādes kabelis



Zobubirstesuzgalis



Ortodontiskais



Uzgalis smaganām



Spiedien auzgalis




Uzgalis deguna



Sprauslu tīrītājs

PG 7

Ierīces uzlādē šanapirms pirmās lietošanas

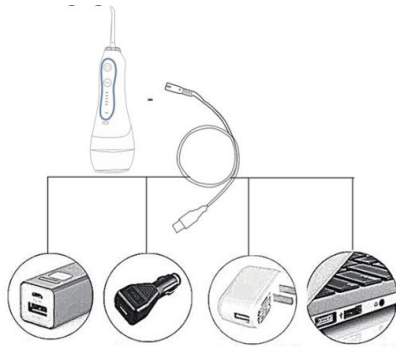

Šim produktam nav lādētāja. Šī ierīce tiek uzlādēta, izmantojot 5 V USB strāvu, piemēram, mobilo tālruni, klēpjdatoru, USB sienas lādētāju utt. Uzlādes laikā uzlādes indikators uz roktura mirgo, un, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, indikatora gaisma ir stabila. Lai pilnībā uzlādētu, nepieciešamas 3-5 stundas.

Reservārauzpilde

PG 8

Sprausla mīkstajiem audiem

Novietojiet periodonta galu saskarē ar smaganām starp zobiem. Novietojiet mīksto uzgali 45 grādu leņķī un uzmanīgi ievietojiet galu zem smaganu līnijas smaganu kabatā. Uzlieciet apūdeņotāju ar zemāko spiedienu un uzmanīgi notīriet, ievērojot smaganu līniju, ievietojot sprauslu starp zobiem. Turpiniet kustēties pa smaganu līniju, viegli masējot smaganas un droši pārvietojot šķidrumu uz smaganu kabatām zem smaganu līnijas.



Spiediena mazgātāja sprausla

Noliecieties virs izlietnes un virziet ūdenskritumu pie zobiem un smaganām, nospiediet roktura slēdzi, lai iedarbinātu ūdens strūklu. Turiet muti nedaudz atvērtu, lai ūdens varētu ieplūst izlietnē. Vērsiet ūdens plūsmu uz smaganām 90 grādu leņķī tā, lai kontakts atrastos smaganu izlīdzināšanas līnijā. Pārvietojiet ūdens strūklu no viena zoba uz otru, veicot īsu pārtraukumu pie katra zoba.



LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

Atveriet tvertnes vāku un piepildiet to ar remdenuūdeni.

Uzgaļu uzstādīšana un noņemšana

Novietojiet sprauslu riteņa centrā apūdeņotāja augšpusē. Stingri spiediet, līdz sprausla nofiksējas vietā. Lai noņemtu sprauslu, nospiediet sprauslas noņemšanas pogu un izvelciet sprauslu no roktura.


UZMANĪBU: Nospiediet sprauslu izstumšanas pogu, kamēr ierīce joprojām darbojas.

Spiediena regulēšana

Irigatora spiedienu var noregulēt, nospiežot režīma pogu uz roktura. Sāciet ar zemāko iestatījumu un palieliniet spiedienu, kā vēlaties.

Kad esat pabeidzis

Izslēdziet ierīci. Iztukšojiet atlikušā šķidruma rezervuāru.

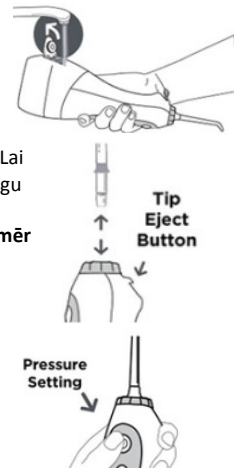

NOSAUKUMA IZMANTOŠANA


Mēles tīrīšanas sprausla

Nolieciet galvu pār izlietni. Pabīdiet spiediena pogu līdz zemākajam solim. Sāciet apūdeņotāju un novietojiet mēles tīrīšanas līdzekli mēles aizmugurē. Lai notīrītu mēli, dodieties tālāk. Turpiniet, līdz esat iztīrījis visu mēli. Pielāgojiet ūdens spiedienu atbilstoši tam, kā tas jums patiek vairāk.



Ortodontiskā sprausla


Izmantojiet ortodontisko uzgali, vienlaikus skalojot ar ūdeni, sukot un skalojot grūti sasniedzamās virsmas ap stiprinājumiem, vainagiem, tiltiem un implantiem. Sāciet ar pēdējo molāru (aizmugurējo zobu). Novietojiet galu 90 grādu leņķī pret smaganu līniju. Uzmanīgi pabīdiet galu pa smaganu līniju, īsi apstājoties, pirms viegli virzāties uz nākamo zobu un augšējo un apakšējo zobu ārējām pusēm, viegli notīriet zonu un ap ortodontiskajām breketēm. Turpiniet, līdz esat notīrījis iekšpusi.

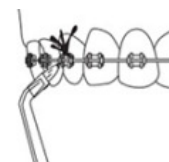

PG 9

Zobu suku sprausla

Pirms apūdeņotāja ieslēgšanas ievietojiet zobu suku uzgali mutē. Viegli pārvietojiet suku galvu gar pārejas zonu starp zobiem un smaganām un dažas sekundes viegli turiet suku galvu ar nelielu kustību uz katra zoba virsmas, lai sasniegtu labākos rezultātus zobu tīrīšanā un smaganu masāžā.

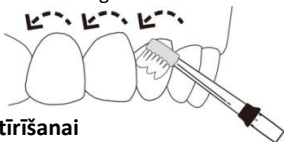

PG 10

Sprausla deguna tīrīšanai

1. Lūdzu, iestatiet ūdens spiedienu līdz minimumam
2. Nelietojiet pārmērīgu spēku, viegli pārvietojieties
3. Nelietojiet ierīci, ja deguna dobums ir pilnībā aizsprostots no abām pusēm
4. Ja lietošanas laikā rodas nepatīkamas sajūtas, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu



Apkope

Pēc katras lietošanas pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir iztukšota, un pēc tam turiet ierīci darbībā 2 līdz 3 sekundes, lai pēc lietošanas viss ūdens tiktu iztukšots. Pretējā gadījumā baktērijas var uzkrāties atlikušajā ūdenī. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Ja nepieciešams, notīriet ārpusi ar mīkstu drāniņu un vieglu, noberzošu šķidrumu. Tvertni var mazgāt ar ziepjūdeni. Iekšpusē notīriet netīrumus ar otu vai tamlīdzīgu un nosusiniet ar drānu. Nosusiniet tvertni, ja ierīci nelietojat ilgu laiku.

Bateriju apkope un iznīcināšana

Saskaņā ar vietējiem vai nacionālajiem noteikumiem pēc akumulatora darbības laika nogādājiet ierīci tuvākajā pārstrādes centrā. Akumulatoru nevar nomainīt.

Biežākās kļūdas un risinājumi

Kļūda	Lespējama cēlonis	Risinājums
Ūdens tvertne izplūst	Ūdens tvertnes vāka blīvējums nav normāls	Noņemiet blīvi un uzlieciet atpakaļ
Ūdens spiediens ir pārāk zems	Nepietiekama jauda	Izmantojiet, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta
	Sprausla ir aizsērējusi	Nomainiet sprauslu
Pēc uzlādes tas darbojas tikai īsu laiku	Akumulatora darbības laiks ir beidzies (Var lejupielādēt aptuveni 500 reizes)	Sazinieties ar pārdevēju (Neatļauta akumulatora izņemšana ir aizliegta)
	Lādēšanas kabelis ir salauzts	Nomainiet uzlādes kabeli
	Adapteris ir salauzts	Nomainiet uzlādes adapteri
Ir dzirdama skaņa, bet ūdens neiznāk	Sprausla ir aizsērējusi	Nomainiet sprauslu
	Iekšējais vārsts pacelts	Kad ierīce ir ieslēgta, pievienojiet nedaudz ūdens kur atrodas sprausla
Nav ne skaņas, ne ūdens	Nepietiekama jauda (Nav izmantots 3 mēnešus)	Lai aktivizētu akumulatoru, nepārtraukti lādējiet to 16 stundas vai ilgāk
Pēkšņi viņš pārtrauca darbu	2 minūšu pārslēgšanās režīms	Vēlreiz ieslēdziet ierīci
	75 grādu motora temperatūras aizsardzība (Maksimāla nepārtraukta lietošana - 5 tvertnes ūdens)	Ieslēdziet vēlreiz 2 stundas pēc lietošanas