


Belaidis burnos irigatorius

Naudotojo instrukcija

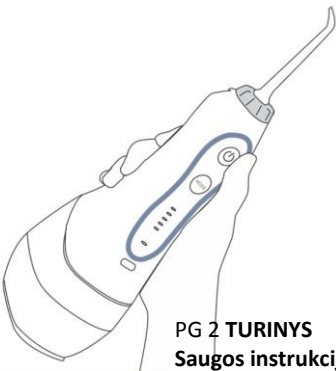

PG 2 TURINYS

Saugos instrukcijos

Prekės aprašymas.....3

Darbo pradži.....5

Priežiūra ir garantija.....7

Dažniausios klaidos ir kaip jas išspręsti.....11

PG 3

Naudojant elektrinius produktus, ypač kai šalia yra vaikai, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias: **PRIEŠ NAUDOJIMĄ Perskaitykite visas instrukcijas.**

PAVOJUS:

Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką:

- Nenaudokite įkroviklio šlapiomis rankomis.
- Nemerkite įkroviklio į vandenį arba panardinkite į skystį.
- Prieš pirmą kartą naudodami įkroviklį, įsitikinkite, kad įkroviklio laidas yra nepažeistas, taip pat patikrinkite jo būklę per visą prietaiso veikimo laiką.

ĮSPĖJIMAS:

Norėdami sumažinti nudegimų, elektros smūgių, gaisro ar kitų sužalojimų riziką žmonėms:


- Nejunkite šio prietaiso į įtampos sistemą, kuri skiriasi nuo prietaise ar įkroviklyje nurodytos įtampos sistemos. **Naudojant netinkamą įtampą, bus sugadintas produktas ir NETAIKOMA garantija.**
- Jei produktas atidaromas / išmontuojamas dėl NET KOKIOS priežasties, garantija NETAIKOMA.
- Nenaudokite šio produkto, jei jo laidas ar kištukas yra pažeistas, jei jis netinkamai veikia, jei jis buvo numestas, sugadintas arba įkritęs į vandenį.
- Nenukreipkite vandens po liežuvio, į ausį, nosį ar kitas subtilias vietas. Šis produktas gali sukelti slėgį, kuris šiose vietose gali rimtai sužaloti.
- Nenukreipkite vandens į nosį ar ausį. Potencialiai mirtina ameba, naegleriafowleri, gali būti kai kurių čiauptų vandenyje arba nechloruotame šulinių vandenyje ir gali būti mirtina patekusi į šias sritis

PG 4


- Šį produktą naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, arba kaip rekomendavo jūsų odontologas.
- Naudokite tik „H2ofloss“ rekomenduotus patarimus ir priedus.
- Nemeskite ir nedėkite pašalinių daiktų į jokias produkto angas.
- Įkrovimo įrenginį ir laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Nenaudokite šio produkto lauke ir ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiami) produktai arba kur tiekiamas deguonis.
- Šiame produkte nenaudokite jodo, fiziologinio tirpalo (druskos tirpalo) ar vandenyje netirpių koncentruotų eterinių aliejų. Jų naudojimas gali sumažinti našumą ir sutrumpinti produkto tarnavimo laiką. Šių produktų naudojimas gali panaikinti garantiją.
- Užpildykite rezervuarą tik vandeniu ar kitu profesionalių odontologų rekomenduojamu tirpalu.
- Prieš naudodami šį produktą, išimkite bet kokius burnos papuošalus.
- Nenaudokite, jei ant liežuvio ar burnoje yra atvira žaizda

PG 5

PREKĖS APRAŠYMAS

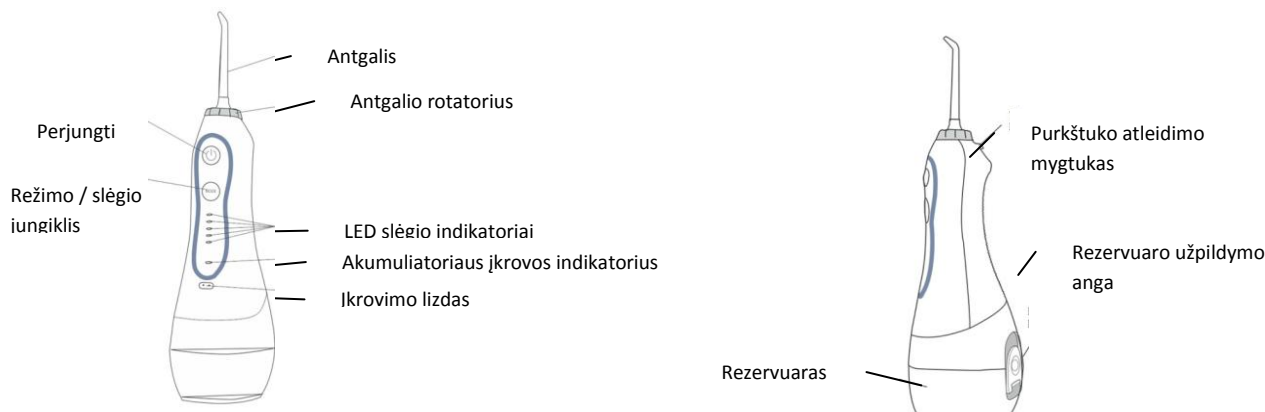

PG 6

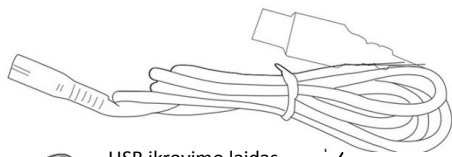

USB įkrovimo laidas



Ortodontinis antgalis



Dantų šepetėlio antgalis



Nosies valymo antgalis

Antgalių valytuvas

Dantenu antgalis




Slėginis antgalis



PG 7

Prietaiso įkrovimas prieš pirmą naudojimą

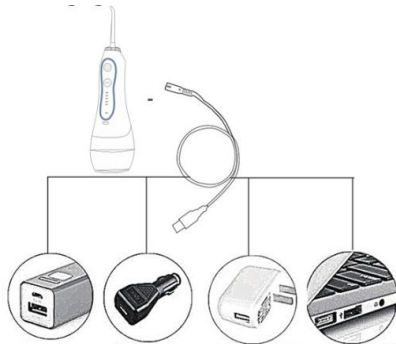

Šis produktas neturi AC / DC įkroviklio. Prietaisas kraunamas per įrenginius, turinčius 5 V USB maitinimo galimybes, pvz., mobilųjį telefoną, nešiojamąjį kompiuterį, USB maitinimo sieninį įkroviklį ir kt. Įkrovimo metu rankenoje mirksi įkrovimo indikatorius ir jis nuolat degs, kol prietaisas bus visiškai įkrautas. Visiškas įkrovimas užtruks 3-5 valandas.

PG 8

Minkštųjų audinių antgalis

Įstatykite periodonto galiuką kontaktuodami su dantenomis. Minkštą galiuką padėkite 45 laipsnių kampu ir atsargiai padėkite antgalį po dantenu linija dantenu kišenėje. Uždėkite drėkintuvą mažiausiu slėgiu ir švelniai valykite dantenu liniją, padėdami antgalį tarp dantenu. Toliau judėkite palei dantenu liniją, švelniai masažuodami dantenas ir saugiai perpilkite skystį į dantenu kišenes žemiau dantenu linijos.



Slėgio plovimo antgalis

Sulenkite virš kriauklės ir nukreipkite krioklį prie dantenu ir dantenu, paspauskite rankenos jungiklį, kad užvestumėte vandens srovę. Laikykite šiek tiek atvirą burną, kad vanduo galėtų tekėti į kriauklę. Vandens srovę nukreipkite į dantenas 90 laipsnių kampu taip, kad kontaktas būtų ties dantenu išlyginimo linija. Perkelkite vandens srovę nuo vieno danties prie kito, padarydami trumpą pertrauką prie kiekvieno danties.


PRADŽIA

Talpyklos užpildymas

Pakelkite talpos viršų ir pripildykite drungnu vandeniu.

Purkštukų montavimas ir nuėmimas

Įstatykite irigatoriaus antgalį į rankenėlės vidurį jos viršuje. Tvirtai spauskite, kol antgalis užsifiksuos. Norėdami nuimti antgalį nuo rankenos, paspauskite antgalio išstūmimo mygtuką ir ištraukite antgalį.

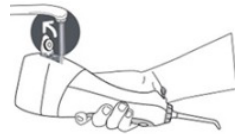

ATSARGIAI: Nespauskite antgalio išstūmimo mygtuko, kai prietaisas įjungtas. Antgalio

Slėgio nustatymas

Galite reguliuoti burnos irigatoriaus slėgio nustatymą paspausdami režimo mygtuką ant rankenos. Pradėkite nuo žemiausio nustatymo ir padidinkite pagal poreikį.

Pabaigus

Išjunkite prietaisą. Ištuštinkite bet kokį talpos skysčio likutį.


ANTGALIŲ NAUDOJIMAS

Periodonto antgalis

Įstatykite periodonto antgalį liesdami tarp dantenu ir dantenu. Palenkite minkštą galiuką prie danties 45 laipsnių kampu ir švelniai įdėkite antgalį po dantenu linija į kišenę. Paleiskite irigatorių nustatydami žemiausią slėgį ir valykite švelniai laikydamiesi dantenu linijos, įkišdami periodonto antgalį tarp dantenu. Toliau sekite išilgai dantenu linijos, kad kas masažuotumėte, ir saugiai leiskite tirpalą į dantenu kišenes žemiau dantenu linijos.

Ortodontinis antgalis

Naudodami ortodontinį antgalį, vienu metu valykite sunkiai pasiekiamas vietas ir kabes, karūnėles, tiltelius bei implantus ir nuplaukite. Pradėkite nuo paskutinio krūminio danties (užpakalinio danties). Padėkite antgalį 90 laipsnių kampu prie danties šalia dantenu. Švelniai slyskite palei dantenu liniją, trumpam sustodami, kad lengvai nuvalytumėte sritį tarp dantenu ir aplink ortodontines kabes, prieš eidami prie kito danties ir viršutinių, ir apatinių dantenu išorės. Tęskite procesą, kol išvalysite visą vidų

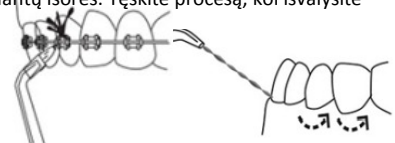

PG 9

Dantų šepetėlio antgalis

Prieš įjungdami irigatorių, įstatykite šepetėlio galvutės antgalį į burną. Švelniai judinkite šepetėlio galvutę išilgai dantų ir dantenų srities ir palaikykite šepetėlio galvutę kelioms sekundėms neužmiršdami kiekvieno danties paviršiaus, kad būtų pasiektas geriausias dantų valymo ir dantenų masažo efektas. Šis veiksmas pašalina nešvarumus ir didesnius maisto likučius prieš juos nuplaunant. Antgalis puikiai tinka atliekant visus odontologinius veiksmus, įskaitant fiksuotus ir nuimamus prietaisus.



PG 10

Nosies valymo antgalis

1. Prašome nustatyti minimalų vandens slėgį
2. Nenaudokite per didelės jėgos, švelniai judėkite
3. Nenaudokite prietaiso, jei nosies ertmė yra visiškai užsikimšusi iš abiejų pusių

4. Jei vartojimo metu atsiranda nepatogumų, pasitarkite su gydytoju

Priežiūra

Nepamirškite ištuštinti vandenį iš talpos vidaus ir 2–3 sekundes paleisti prietaisą, kad po naudojimo išbėgtų likęs vanduo. Priešingu atveju bakterijos gali kauptis likusiame vandenyje. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Jei reikia, išorę nuvalykite minkštu skudurėliu ir švelniu neabrazyviniu valikliu. Talpą galima nuplauti muiluotu vandeniu. Nuvalykite nešvarumus iš vidaus šepetėliu ar audiniu. Išdžiovinkite talpą ilgą laiką nenaudodami. Baterijos priežiūra ir utilizavimas

Baterijų priežiūra ir utilizavimas

Prietaise yra ličio baterija. Pasibaigus baterijos veikimo laikui, išmeskite ją artimiausiame perdirbimo centre pagal vieos ar šalies reikalavimus. Baterijos nėra keičiama.

Dažniausios klaidos ir sprendimai

Klaida	Galima priežastis	Sprendimas
Vandens bakas nesandarus	Vandens bako dangčio tarpiklis nėra įprastas	Nuimkite tarpiklį ir uždėkite
Vandens slėgis per žemas	Nepakanka galios	Naudokite, kai prietaisas yra visiškai įkrautas
	Purkštukas užsikimšęs	Pakeiskite purkštuką
Po įkrovimo jis veikia tik trumpą laiką	Baterijos veikimo laikas baigėsi (Galima atsisiųsti apie 500 kartų)	Susisiekite su pardavėju (Pašalinti akumuliatorių draudžiama be leidimo)
	Įkrovimo laidas sugedęs	Pakeiskite įkrovimo laidą
	Adapteris sugedęs	Pakeiskite įkrovimo adapterį
Girdimas garsas, bet vanduo neišeina	Purkštukas užsikimšęs	Pakeiskite purkštuką
	Vidinis vožtuvas pakeltas	Įjungę prietaisą, įpilkite šiek tiek vandens kur padėtas antgalis
Nėra garso ir vandens neišeina	Nepakanka galios (Nenaudojamas 3 mėnesius)	Norėdami suaktyvinti akumuliatorių, nuolat jį įkraukite 16 valandų ar daugiau
Staiga jis nustojo dirbti	2 minučių perjungimo režimas	Vėl įjunkite įrenginį
	75 laipsnių variklio apsauga (Maksimalus nepertraukiamas naudojimas - 5 bakai vandens)	2 valandas po naudojimo vėl įjunkite