





Perfit ZR

LIHTSAIM VIIS PERFECTSE ESTEETIKA SAAVUTAMISEKS

- Lihtne töödelda
- VITA toonijuhisele täiuslikult vastav värv teeb värvimise kiireks ja lihtsaks ka algajatele, et saaksite kogeda ühtlast kvaliteeti ja säästa ka oma väärtuslikku aega
- Emaili-varjundiga esteetiline poolläbipaistvus
- See saavutab suurema läbipaistvuse pärast lõplikku glasuurimist. Tulemuseks on valgust reflekteeriv hambakroon, mis on sarnane loomulike hammastega
- **Säilitab enam kui 90%-lise stabiilsuse ja läbipaistvuse isegi kiir-paagutamisel**
- Suurepärase stabiilsuse kiirel paagutamisel
- Tsintreerimiseks sobivad kõik paagutusahjud.
- Proovige tugevaimat ja stabiilsemat hambatsirkooniumoksiidi!
- 5-seerialine tootevalik iga näidustuse jaoks - vastavalt preparatsiooni ulatusele, näidustustele ja asukohale

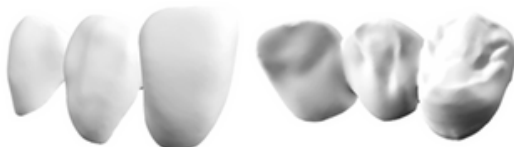


TS ML

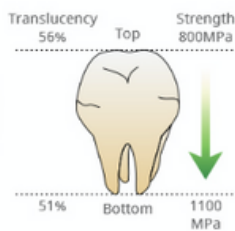

Trans & Shade Multi

Indication	All Restoration from Crown to Bridge
Material	4Y-TZP/5Y-TZP
Flexural Strength (MPa)	800~1,110
Translucency(%) ¹⁾	46-50
Shade(VITA)	A1, A2, A3, A3.5
Thickness(Ø98 x mm)	12, 14, 16, 18, 20, 22, 25

1) sample thickness 1mm. White-color zirconia (base material) is used as testing material

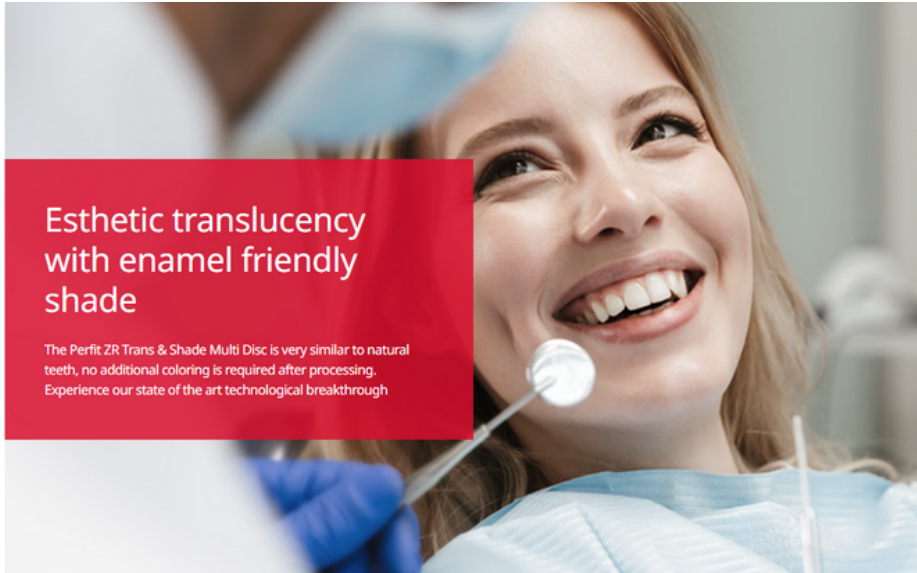

Esthetic translucency with enamel friendly shade

The Perfit ZR Trans & Shade Multi Disc is very similar to natural teeth, no additional coloring is required after processing. Experience our state of the art technological breakthrough



Perfit ZR

A Company

- Võrreldes ettevõttega A on Perfit ZR ST kroon läbipaistvama hambumuspinnaga ja translutsentne.
- Võrreldes ettevõttega A, on Perfit ZR ST kroon sarnasem värvile A.

Vaadake lisaks:

<https://www.vatechmcis.com/en/perfit-zr.do>

Made in VATECH MCIS

We produce zirconia powder with our own internalized technology, ensuring outstanding quality.



Võtke meiega ühendust:

Hambastudio AS; Juhkentali 22-101; 10132 Tallinn; info@hambastudio.ee; +37256451249

www.dentalglam.ee






Perfit FS

IDEAALNE - KROONID KABINETIS ÜHE VISIIDI JOOKSUL

- Perfit FS - kõige loomulikuma välimusega restauratsioonid, mille paindetugevus on 760 MPa.
- Ei vaja põletamisprotsessi, nii et saate säästa oma väärtuslikku aega ja keskenduda rohkem oma patsientidele.
- Kõrge paindetugevus 760 MPa
- Ühekordse külastuse korral - puudub vajadus ahjus põletada
- 33% vähem hammaste ettevalmistust
- Esteetiline poolläbipaistvus tugevust kahjustamata
- Vähem lõhenemist ja hammaste pragusid

Vaadake lisaks:

<https://www.vatechmcis.com/en/perfit-fs.do>

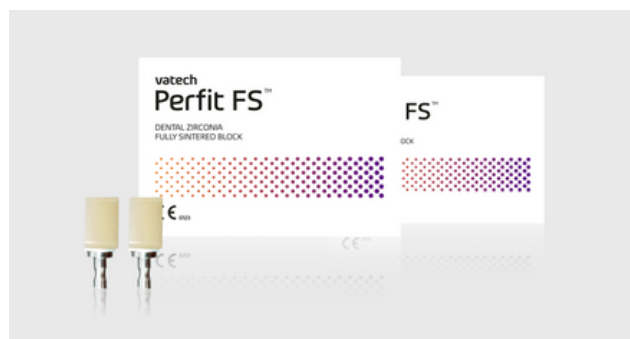

Esteetiline translutsentsus tugevuse arvelt järelandmisi tegemata

Mitmehilised plokid

Täielikult sintreeritud!



Indication	Crown, Inlay, Bridge
Flexural Strength (MPa)	500
Translucency(%)	>44
Shade	A1, A2, A3, A3.5
Size(L X W X H mm)	C14(18 X 14.5 X 12.4) / C16(18 X 15.9 X 17.8) / B32(32 X 15.1 X 15.1)

No oven time enables One-Visit prosthesis

In general, after the Lithium disilicate types are milled, firing process must be required in the Porcelain furnace for approximately 20 to 30 minutes. It is called as Crystallization process. However, Perfit FS, a fully sintered zirconia block, needs no additional firing process after milling. Thus you can save your valuable chair time.



Buccal side



Lingual side



Before



After

Võtke meiega ühendust:

Hambastudio AS; Juhkentali 22-101; 10132 Tallinn; info@hambastudio.ee; +37256451249

www.dentalglam.ee

